

MATELAS  
THÉRAPEUTIQUES

NOUVEAU

# axtear automorpho<sup>®</sup> plus



Dispositifs médicaux de classe 1



OPTEZ POUR LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE MATELAS  
TOUT AUTOMATIQUE AUTOMORPHO PLUS  
THÉRAPIE & CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

EXPERTISE PRODUCTS

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES

EXPERTISE SERVICES



WIN  CARE



## PRÉVENTION D'ESCARRES



10,88 € TTC avec PLV


Forfait location hebdomadaire - CODE 1282740 -

### ► Modalités de prescription

Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, l'**association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire**. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux. (HAS).

Pour réduire le risque de piégeage et de chutes, une évaluation des risques du patient avec l'ensemble « lit médical, accessoires, matelas, et positions articulées du sommier » doit être réalisée. [Norme harmonisée EN 60601-2-52 (§ 201.9.1.101)]

## EXEMPLE ORDONNANCE DOMICILE

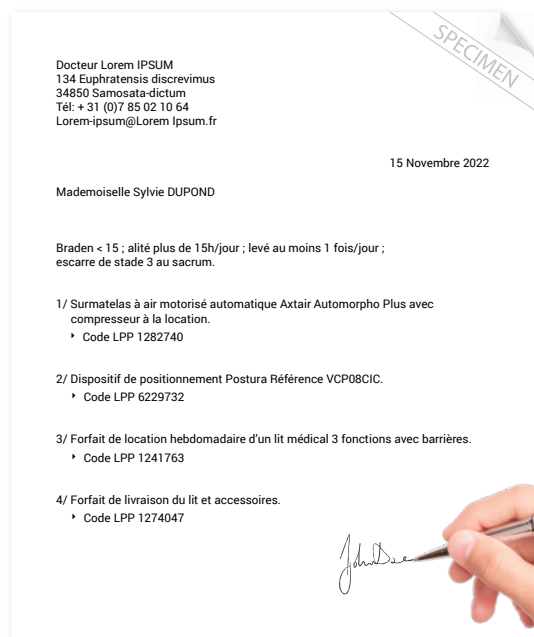


### Attention

La mise à disposition d'un matelas de prévention des escarres ne dispense pas des autres soins de traitement et/ou de prévention

## LES DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE

Les aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés permettent, en position allongée, d'assurer la mise en place simple et rapide d'un maintien postural des membres inférieurs. Le but est de **soutenir** et/ou **corriger** et/ou **prévenir** les postures vicieuses. Elles permettent d'aider à la prévention ou au traitement d'une escarre par réduction de la pression et des forces de cisaillement exercées sur la peau dans les zones à risque d'escarre.

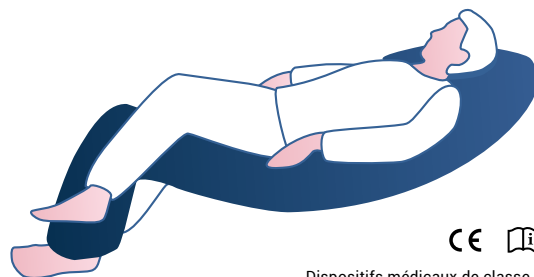

## FLASHEZ NOS VIDÉOS DE DÉMONSTRATION

### POSITION DÉCUBITUS LATÉRAL 30°

Pour réduire les pressions sous la zone sacrée.



### POSITION SEMI FOWLER

Pour réduire au maximum les pressions au niveau des zones de contact.



### DÉCHARGE TALONNIÈRE


Pour soulager les pressions exercées sur le talon.

Décharge talonnière avec anti-équín



Décharge talonnière sans anti-équín



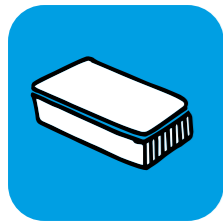

# axtair automorpho<sup>®</sup> plus

3 largeurs de lits disponibles  
90 | 100 | 120 cm




NORMES FEUX  
EN 597 partie 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D



## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.  
Patient alité plus de 15 heures par jour.  
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Score sur l'Échelle de Braden

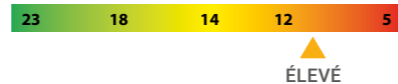

## CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Bouchon de transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures
- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence \*

\* Pour un patient de 80 kg à plat



**30 ≤ 180kg**



## CELLULES


- ▶ 18 cellules en Polyuréthane
- QUALITÉ | SOLIDITÉ | SILENCIEUSES**




## NOUVELLE SÉRIGRAPHIE DE LA HOUSSE

- ▶ Résistance à la pénétration des effluents biologiques
- ▶ Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Barrières renforcées aux micro-organismes
- ▶ Usage intensif multi-patient
- ▶ Largeur du matelas sérigraphiée
- ▶ Rabat long pour une meilleure hygiène
- ▶ Disponible en version Promust **CIC** \* / **PUHD**

\* Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées

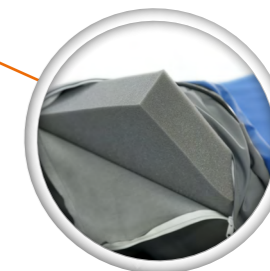

## ETIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

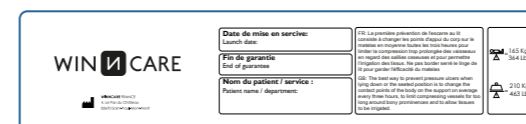

▶ Etiquette de traçabilité au pied du matelas

## CAISSON INDÉPENDANT AVEC SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Caisson entièrement indépendant qui protège la base mousse
- ▶ Dotée d'une base anti dérapante pour une meilleure stabilité du matelas sur le sommier
- ▶ Protège le patient en cas de défaillance des cellules d'air

## SAC DE TRANSPORT




- ▶ Livré prêt à l'emploi dans un sac de transport (meilleure hygiène et facile à transporter)



## 4 DÉCHARGES TALONNIÈRES

- ▶ Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas

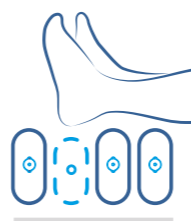


Facilement mise en décharge grâce à une vanne avec molette



## COMPRESSEUR

- Interface graphique plus intuitive
- 3 modes de fonctionnement
  - Dynamique
  - Statique basse pression
  - Soins
- Réglage confort & Position assise
- QR code «SCAN ME!» pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur

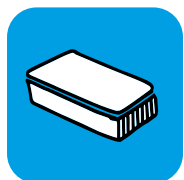

axtair automorpho<sup>®</sup>  
plus

## plus PERFORMANT

- + Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- + 3 modes de fonctionnement : Dynamique, Statique basse pression, Soins
- + Décharges talonnières intégrées
- + Lavage en machine barrière à 60° permettant une meilleure fiabilisation du protocole d'hygiène

## plus CONFORTABLE

- + Large couverture de poids patient de **30 à 180kg**
- + Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient
- + Gestion de la position assise

## plus SIMPLE D'UTILISATION

- + QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- + Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- + Sérigraphie simplifiée sur la housse
- + Interface graphique plus intuitive

## plus DE SÉCURITÉ

- + Vanne CPR plus visible et avec rapidité d'accès
- + Passe câble de série (côté droit)
- + Alarmes visuelles et sonores
- + Gestion de la maintenance avec le **programme AIRCARE**
- + Conformité à la nouvelle norme NF EN ISO 20340-1
- + Indice de protection IP42

## plus ÉCOLOGIQUE

- + Conception et **fabrication française**
- + Démarche d'**éco-conception respectueuse de l'environnement**
- + Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- + Une sangle de roulage



# AIRCARE

Un logiciel de maintenance simple d'utilisation

Plateforme sécurisée pour la traçabilité de votre parc et des interventions de maintenance préventives et curatives

Un logiciel commun à l'ensemble des dispositifs **AXTAIR®** versions **PLUS** ou **AXENSOR**



**axtair automorpho® plus**



Dispositifs médicaux de classe 1



- ▶ Reconnaissance automatique du support à maintenir
- ▶ Téléchargement gratuit
- ▶ Logiciel Live Update



Outil fabricant



Traçabilité optimisée et sécurisée  
une réponse clé en main aux exigences réglementaires



Éco-conception

- ▶ Moins de déchets
- ▶ Facilité de recyclage en fin de vie
- ▶ Optimisation des pièces détachées
- ▶ Réduction de la consommation d'énergie



Maintenance simplifiée



Gain de temps

## DES COÛTS DE MAINTENANCE MAÎTRISÉS

Coût de révision basé sur un parc de 50 matelas  
Durée d'exploitation 6 ans ▶ 2 révisions



**70%** de réduction des coûts avec Aircare

### Avantages

- ▶ Temps d'intervention réduit
- ▶ Réactivité et autonomie du personnel technique
- ▶ Réduction des coûts logistiques et gain de temps
- ▶ Une totale autonomie sur les maintenances
- ▶ Une traçabilité intégrée dans le respect de la réglementation

## Les nouvelles références commandes **axtair automorpho® plus**

KIT COMMERCIAL COMPLET AXTAIR AUTOMORPHO PLUS (INSCRIT À LA LPPR)		Référence - Ancienne version	Référence - Nouvelle version
90	Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD	VAXT4/AUTO-P	Inchangé
	Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC	VAXT4/CIC-P	Inchangé
100	Surmatelas (100 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD	VAXT4/AUTO100-P	Inchangé
	Surmatelas (100 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC	VAXT4/CIC100-P	Inchangé
120	Surmatelas (120 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD	VAXT4/AUTO120-P	Inchangé
	Surmatelas (120 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC	VAXT4/CIC120-P	Inchangé



winncare.fr

WIN  CARE