

LES BARRIÈRES DE PROTECTION



GESTION
DES CHUTES

PARCE QUE CHAQUE PATIENT MÉRITE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, NOUS VOUS PROPOSONS 3 ACCESSOIRES DIFFÉRENTS :

BARRIÈRES 3/4 MÉTAL - 3 BARREAUX



Ces barrières escamotables sont compatibles avec tous nos lits*. Équipées de systèmes de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences de la norme 60 601-2-52 en matière d'espacement.

Elles sont compatibles avec notre habillage hôtelier et disponibles dans 4 coloris suivant le coloris du châssis du lit.



Système de fixation par indexation



* Sauf Kalin

▶ Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise

BARRIÈRES PLEINES LONGUEUR EN BOIS



Ce sont des barrières coulissantes fixées dans les panneaux de tête et de pied de lit. Elles peuvent être positionnées sur toute notre gamme lit (largeur 90/100/120/140/160 cm). Elles sont également compatibles avec nos rallonges de sommier grâce à des extensions spécifiques (voir ci-contre)

Ces barrières sont compatibles avec 2 panneaux de notre gamme :

▶ Carmen ▶ Val de vie

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d'espacement.

Disponibles en 3 finitions :

▶ Enrobage polymère coloris Chêne Lindberg.
▶ Peinture vernie suivant les coloris du nuancier
▶ Peinture laquée suivant les coloris du nuancier

Compatibilité

- ▶ Toutes nos barrières sont incompatibles avec l'habillage long pan universel
- ▶ Les barrières sont obligatoires pour les habillages hôteliers avec longs pans larges (option disponible avec panneaux Carmen et Medidom)

LES BARRIÈRES DE PROTECTION



GESTION
DES CHUTES

1/2 BARRIÈRES ALUMINIUM/ BOIS



Ce sont des barrières coulissantes, composées de 2 segments de dimensions identiques. Elles sont munies d'un système de verrouillage/déverrouillage breveté garantissant une sécurité pour les patients.

La partie métallique est en aluminium, la partie supérieure (main courante) est en bois Massif.

Ces barrières sont compatibles avec :

- ▶ Tous nos lits * ▶ Les panneaux : Abélia / Stylvia / Novida

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d'espacement.

BREVETÉ
N°FR3067927

Déverrouillage sécurisé de la 1/2 barrière par mécanisme de double action :


Il faut simultanément appuyer sur les 2 boutons et lever la barrière pour pouvoir l'abaisser ensuite.

- ▶ 3 hauteurs = 3 utilisations
- ▶ position haute = contention
- ▶ position intermédiaire = perception sécurisante pour le patient
- ▶ position basse = sortie et entrée dans le lit

Elles sont disponibles en 2 finitions pour la main courante :

- ▶ Vernis suivant les coloris du nuancier
- ▶ Peinture laquée suivant les coloris du nuancier

* Sauf Kalin, DUO, Médicalys

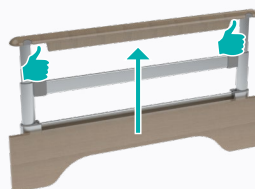

	ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMME AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
Barrière pliante A637-00/A638-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Longueur en position dépliée : 1,47 m Hauteur en position dépliée : 37,5 cm par rapport au sommier	Métal peint
Barrière bois A671-00 (décor Chêne Lindberg) Autres finitions : A580-00 (Vernis) A581-00 (Laqué)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Modèle spécifique	Longueur totale du lit Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier Disponible avec une rallonge (extension pour utilisation avec rallonge de sommier – 4 pièces) : A685-00 (Chêne Lindberg) A687-00 (Laqué)	Enrobage polymère chêne Lindberg ou laque
Demi-barrière Aluminium A688-00/A689-00	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	3 hauteurs d'utilisation	Aluminium/ Bois massif laqué ou verni

➤ Des alternatives à la contention : pensez au tapis de chute !

TAPIS SÉCURFORM PROTECTION, STABILITÉ, PRATICITÉ

Pour limiter l'usage de la contention tout en assurant la sécurité des patients et résidents à risque de chute.



Référence : 07.2900

Le tapis d'amortissement SÉCURFORM est préconisé pour protéger les personnes en cas de chute. Spécialement étudiée, la mousse apporte une **excellente protection** aux patients. Elle permet une **bonne stabilité** lors de la marche et un **accès direct et facile** aux soignants. Le tapis d'amortissement SÉCURFORM est **déhoussable, pliable et se range facilement**.

Caractéristiques du tapis d'amortissement :

- ▶ Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³