

L'AUTOMATISME POUR LES PREMIERS STADES DE L'ESCARRE



À commander sur le site (30) Nîmes

COMPATIBLE PROGRAMME AirCare®

automatic technology BREVET

Score sur l'Échelle de Braden



axtairone[®]
PLUS

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN** à **ÉLEVÉ**.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1** à **2**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 165kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



10,88 € TTC
Forfait location hebdomadaire
CODE - 1293872

LES + PRODUIT

- Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l'escarre.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL
	VAXT2/ONE-P
	VAXT2/ONE/CIC-P

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ Réglages confort
- ▶ QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- ▶ Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- ▶ Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- ▶ Dimension matelas : 195 x 17 x 87 cm
- ▶ Poids matelas : ~ 10,6 kg (+ compresseur de 2,7 kg)
- ▶ 2 housses disponibles : PROMUST PU et PROMUST CIC
- ▶ Etiquette de traçabilité au pied du matelas
- ▶ Compatibilité Rehawash et machines barrières






CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence

BOUCHON DE TRANSPORT

Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures*.


* Pour un patient de 80 Kg à plat

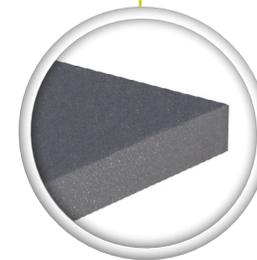

HOUSSE SÉRIGRAPHÉE

- ▶ Bi élastique et imperméable au liquide et perméable à la vapeur d'eau, ignifugé
- ▶ Rabat long pour une meilleure hygiène
- ▶ Disponible en version **PROMUST PU** et **CIC** *

* Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées

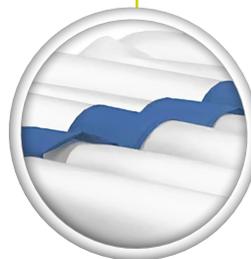

CELLULES

- ▶ 18 cellules polyuréthane avec 12 cm de hauteur thérapeutique

**QUALITÉ
SOLIDITÉ
SILENCIEUSES**

SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Protège le patient en cas de défaillance des cellules d'air hauteur 5cm

COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Mode à pression alternée ou dynamique
- Réglages confort : personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- Alarmes : visuelle et sonore
- Numéro de série au dos du compresseur,
- QR code "SCAN ME !" pour un accès simple et rapide aux informations
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

